

## セイコーオプティカルプロダクツ株式会社

2021年5月

セイコーオプティカルプロダクツ株式会社

 レンズ表面に付着した細菌の増殖を抑制する抗菌コーティング  
 『衛生ケアプラス』新発売のご案内



セイコーレンズの抗菌コーティング

衛生ケア PLUS

日常生活に安心をプラス

SIAA  
ISO 22196  
抗菌加工

衛生ケアプラスの構造

衛生ケアプラス Ag<sup>+</sup>

撥水コート  
反射防止コート  
ハードコート  
レンズ基材

衛生ケアプラス 抗菌

※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※画像・イラストはイメージです。

拝啓 時下、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は、当社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび当社では、レンズ表面に付着した細菌の増殖を抑制する抗菌(※1)コーティング『衛生ケアプラス』を、2021年5月20日(木)より全国で発売し、受注を開始いたします。

「新しい生活様式」が浸透し、身近なものへの衛生意識が高まる中、お客様のニーズにお応えすべく新たに開発された抗菌コーティングが『衛生ケアプラス』です。

『衛生ケアプラス』は、撥水コートと反射防止コートの間に銀イオン等を含んだ抗菌コート層を挟むことで、細菌の増殖を抑制する抗菌性能を発揮する抗菌加工製品(※2)です。その効果は、「SIAA(抗菌製品技術協議会※3)」に認められ、認証マークを取得しております。

日常生活に安心をプラスする抗菌コーティング『衛生ケアプラス』を、この機会に是非おすすめ下さい。

**(※1) 抗菌 とは**

菌を長時間増やさない様にすることを抗菌と言います。菌を一時的に死滅・除去する殺菌・除菌とは区別されます。

抗菌	滅菌	殺菌	消毒	除菌
製品の表面上における細菌の増殖を抑制すること。	微生物を完全に死滅させること。	細菌などの微生物を死滅させること。	微生物のうち病原性のあるものを全て殺滅・除去してしまうこと。	ある物質又は限られた空間より微生物を除去すること。

### (※2) 抗菌加工製品とは

表面の細菌を増殖させないように加工されている製品を抗菌加工製品といいます。

J I S (日本工業規格) では、加工されていない製品の表面と比較し、細菌の増殖割合が100分の1以下(抗菌活性値2以上)である場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。

### (※3) S I A A (抗菌製品技術協議会)とは

適正で安心できる抗菌・防カビ加工製品の普及を目的とし、抗菌剤・防カビ剤および抗菌・防カビ加工製品のメーカー、抗菌試験機関が集まってできた団体です。業界だけでなく、消費者代表、専門家および行政などの幅広い意見を聞きながら、抗菌加工製品に求められる品質や安全性に関するルールを整備し、かつそのルールに適合した製品の安心のシンボルS I A Aマーク表示を認めています。


※一般社団法人抗菌製品技術協議会HP <https://www.kohkin.net/siaa.html> より引用

敬具

## 記

### 【発売概要】

- 商品名 衛生ケアプラス [ 略号 : E C ]
- 発売日 2021年 5月20日 (木) (※4)
- 特長 レンズ表面に付着した細菌の増殖を抑制する抗菌コーティング  
\* レンズ表面にコートハガレ・キズ等の瑕疵が発生しない限り抗菌効果は持続  
\* 反射色はベースとなるコートに準ずる

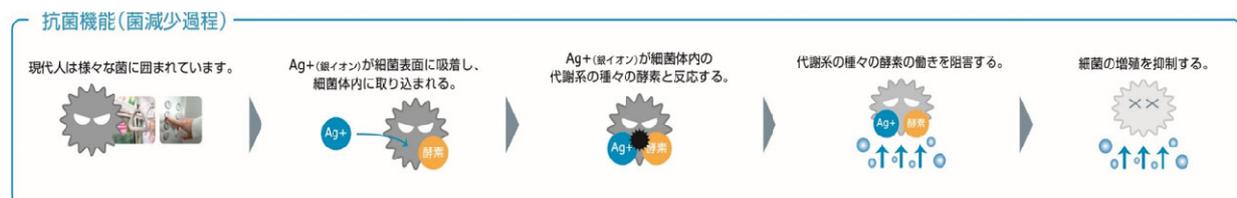

- 納期 標準納期 + 1日
- 対応機種 (※4) セイコーレンズ (特注品)  
SRC2 UVP-BR / SRC2 UVP / RC-BR / RC  
1.74 / 1.67 / 1.60 素材
- カラー アリアーテトレス、ファンクションカラー、見本色

(※4) 対応機種および発売日の詳細については、別紙[衛生ケアプラス 受注可能レンズ一覧]にてご確認下さい。

以上

# 衛生ケアプラス 受注可能レンズ一覧

衛生ケアプラスは、下記○印のレンズにて受注が可能です。（全て特注受注となります。）

SEIKO		1.74	1.67	1.60	1.50	
インディヴィジュアルレンズ （あなた仕様のレンズ）	テイラーメイドレンズ	スペリオールPX	○	○	○	
	カスタムレンズ	バシュートAC-X 〈オールラウンド/タウン/オフィス/ルーム〉	○	○	○	
		バシュートCV-X 〈オールラウンド/タウン/オフィス/ルーム〉	○	○	○	
		バシュートNV-X 〈オールラウンド/タウン/オフィス/ルーム〉	○	○	○	
		インテグラルCS 〈オールラウンド/タウン/オフィス/ルーム〉	○	○	○	
		インテグラルNS 〈オールラウンド/タウン/オフィス/ルーム〉	○	○	○	
		シナジー/シナジーWD ※6月1日より	○	○	○	
		ヴァリユーレンズ	ヴィジオDS	○	○	○
		ヴィジオRA	○	○	○	
		ヴィジオDW	○	○	○	
	年代別カスタムレンズ	バシュートEV ※6月1日より		○	○	
	用途別カスタムレンズ	インドアLD ※6月1日より		○	○	
		インドアMD ※6月1日より		○	○	
		インドア100/インドア200 ※6月1日より		○	○	
インドアPC ※6月1日より			○	○		
サポートレンズ （近視・遠視・乱視用レンズ・単焦点レンズ）	インディヴィジュアルレンズ	マイフォーカスEX ※6月1日より	○	○	○	
		マイフォーカス ※6月1日より	○	○	○	
	プライムビジョンレンズ	A-ZONE	○	○	○	
	コンフォタブルビジョンレンズ	SPG AZ	○			
		SSV AZ		○		
		SLU AZ			○	
	ナチュラルビジョンレンズ	プレステージ	○			
		スーパーソブリン		○		
		スーパールーシャス			○	
	サポートレンズ	スマートエイド ライト スマートエイド レギュラー ※6月1日より		○	○	

衛生ケアプラスはベースコート【SRC2 UVP-BR・SRC2 UVP・RC-BR・RC】に付加することができます。  
（※スペリオールPX、マイフォーカスEX、A-ZONEはRC-BR非対応）

**注意事項** ※セイコートライベックスシリーズ、ソレール、ポーラーシンはお受けしておりません。  
※セイコーフロンティアについてもオプション加工対応可能です。詳しくは「セイコーフロンティア受注可能レンズ一覧」をご確認ください。